

# ATAGO

*Hand-Held Refractometer*

**MODEL: Master-M**


手持式糖度計中文操作說明

*Lab Online Exhibition*  
[www.1788lab.com](http://www.1788lab.com)  
*E-mail: info@1788lab.com*







1) 將欲測試之液體，放 1~2 滴到稜鏡上

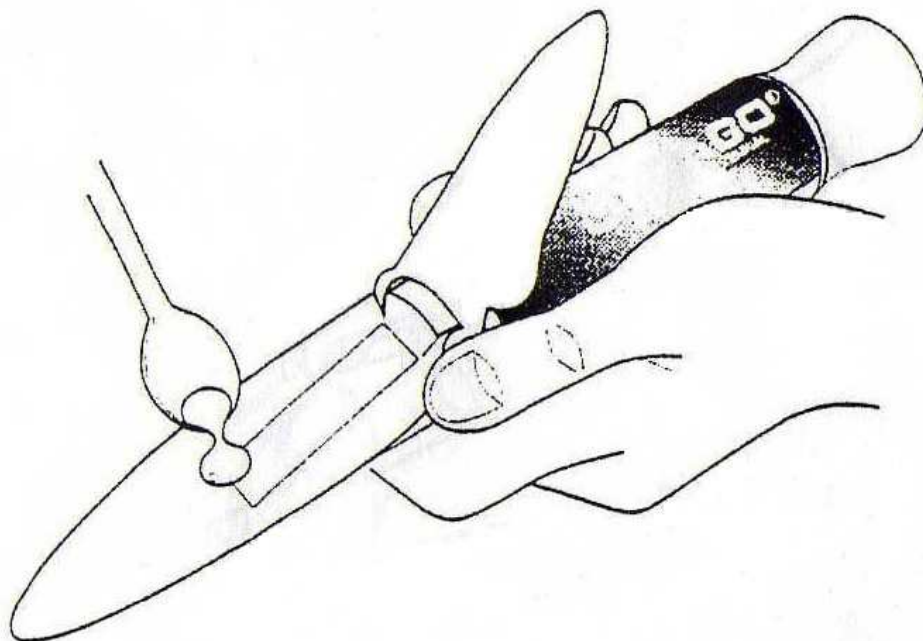


2) 輕輕蓋上採光板

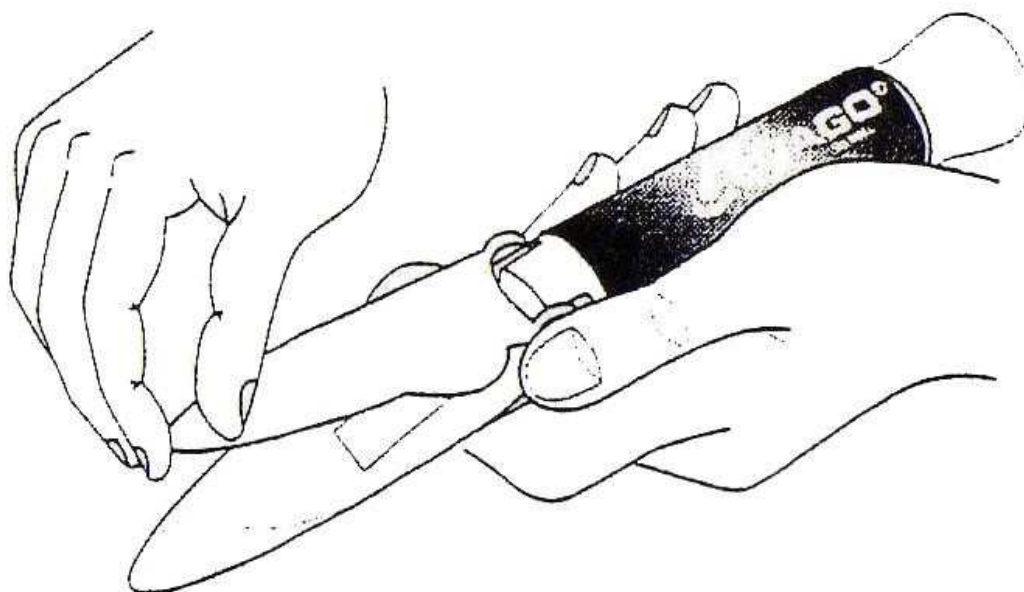


3) 將液體覆蓋於整個稜鏡表面

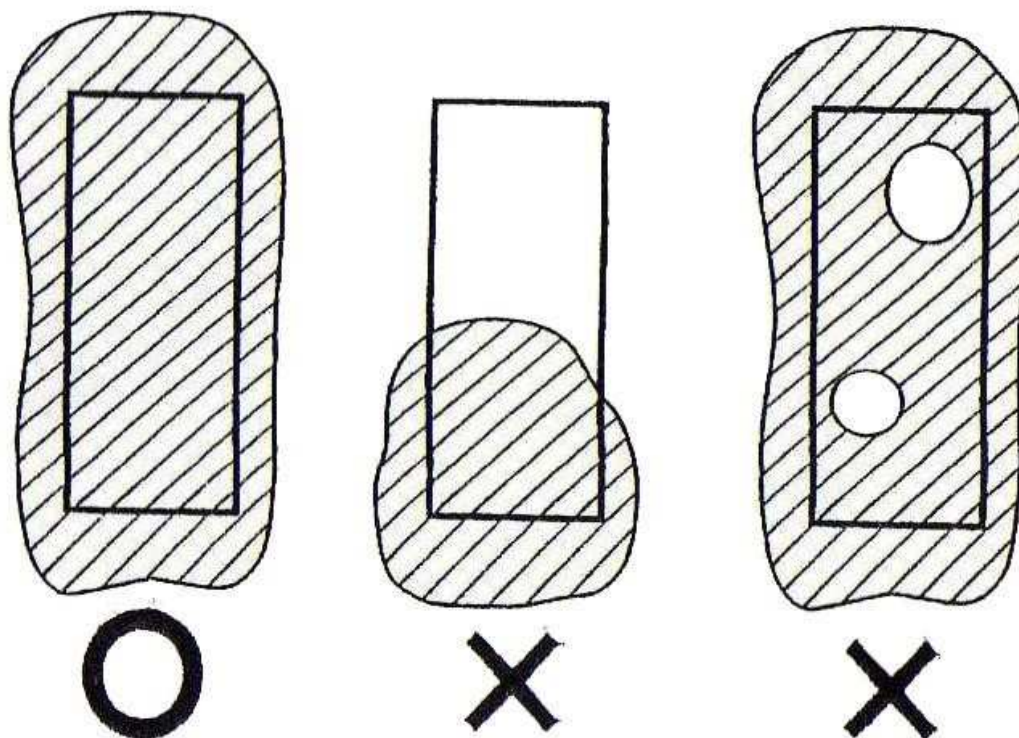

4) 經由接目鏡查看刻度

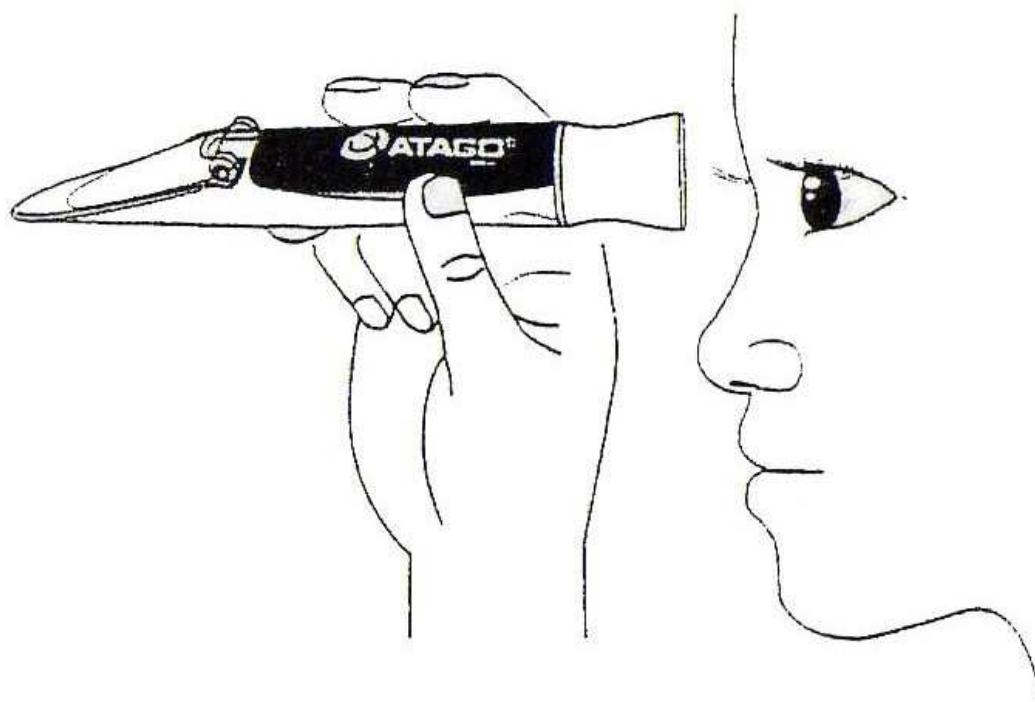

5) 觀看刻度上的界限

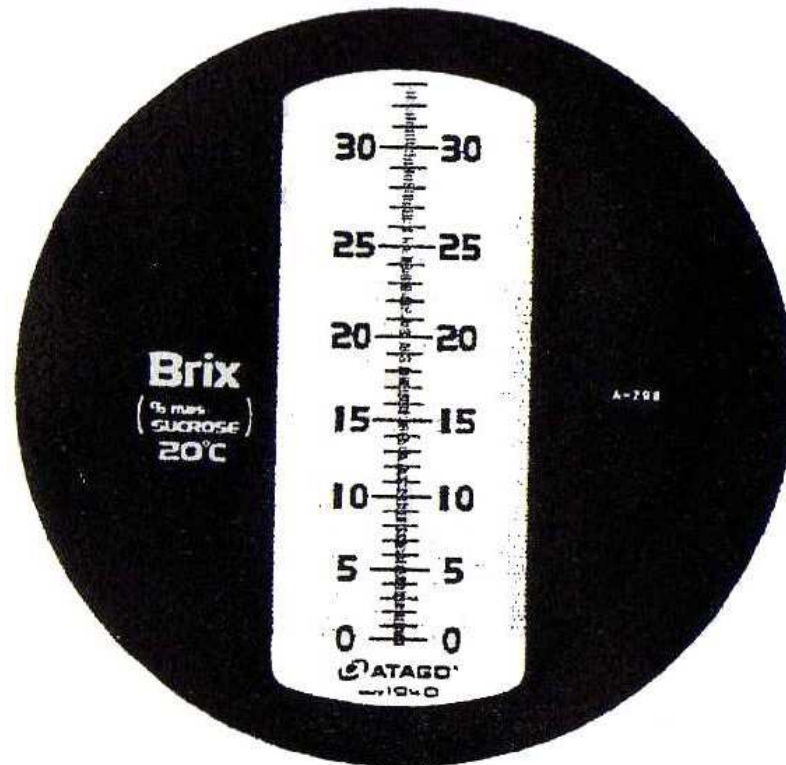

6) 附螺絲起子為歸零用

